


1º Imprima o guia de tamanho em 'Tamanho Real' ou '100%'.

Para conferir se a impressão está correta verifique se o quadrado mede 2,5 cm:

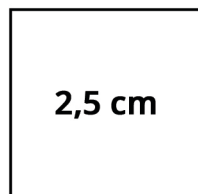

2º Após confirmar se o guia foi impresso corretamente, recorte de acordo com as indicações.


3º Experimente cada molde de almofada do nariz e escolha o menor tamanho de almofada que não fique obstruindo as laterais do nariz ou olhos.



Mirage Micro™


Mirage Activa™ LT

Mirage™ SoftGel

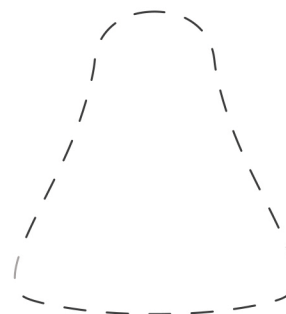


Tamanho Pequeno (S)

Altura: 4,0 cm
Largura: 3,8 cm

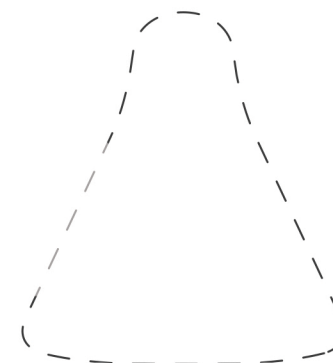


Tamanho Médio (M)

Altura: 4,7 cm
Largura: 4,2 cm

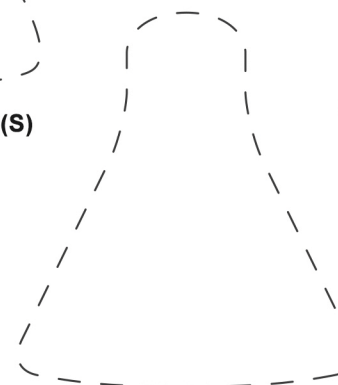


Tamanho Grande (L)

Altura: 4,8 cm
Largura: 4,5 cm

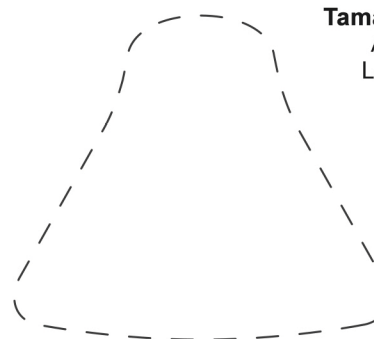

Tamanho Grande largo (LW)

Altura: 4,3 cm
Largura: 4,8 cm

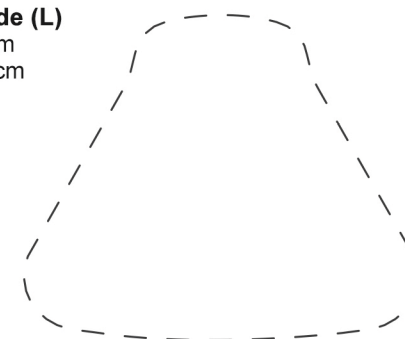

(somente Mirage Micro)
Tamanho Extra grande (XL)

Altura: 4,3 cm
Largura: 5,2 cm